

iRest®  
艾力斯特  
—有健康·有未来—

## 常乐派 足部按摩器 Foot massager (SL-C39S)

精心呵护您的“第二心脏”

智能模拟真人手法按摩

iRest®  
艾力斯特  
—有健康·有未来—

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号  
电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造:浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号  
电话:0577-63176666 传真:0577-63176699

Http://www.iRest.cn E-mail: iRest@iRest.cn

**服务热线: 800-8577-202 400-8888-786**



微商户



官方旗舰店



官方微信



官方微博

注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知。  
产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

**请妥善保管此说明书**



2015年6月 第一版

2015年6月 第一版印刷

## 常乐派 足部按摩器 Foot massager (SL-C39S)

精心呵护您的“第二心脏”  
智能模拟真人手法按摩



**使用说明书**

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此操作手册，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管操作手册，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

## 安全与保养事项

### 1. 重要安全警告

- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处
- 禁止将水泼向本产品，以免短路引起事故
- 如果电源线或插头损坏，千万不要擅自拆卸修理，请及时与经销商联系，要求维修保养
- 请使用与此器具匹配的电源
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害
- 请按本手册指示使用此器具
- 不可使用未推荐的配件及附件
- 请勿在室外使用此器具
- 请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 颈背受伤或近期内动过手术者，请遵照医师的指示小心使用

### 2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具

### 3. 不宜使用此器具者

- 皮肤传染病者
- 骨质疏松症患者
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者
- 发高烧者
- 孕妇或经期妇女

### 身体有创伤或体表患病者

- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者
- 身体潮湿时禁止使用此器具
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

## 4、安全事项

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源适配器发生任何损坏或功能异常，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 整机皮罩或在罩破损应禁止使用。
- 切勿用力猛压或全身施压在按摩垫上，不能与硬物体相接触，不可重压或踩踏。
- 防止水或其他腐蚀性液体流入机内从而引起故障，导致损坏机器。
- 请勿用手提电源线或手控线，从而造成机体悬空和摇摆，导致线芯断开使其无法正常工作。
- 请勿任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源及易燃的地方，容易发生故障和危险，易造成变形，变色或损坏。
- 使用过程中有异常因立即停止使用并切断电源。
- 精神病患者，身体瘫痪患者必须在有人看护下谨慎使用或先咨询医师意见。

## 使用指南

每天使用1-2次，每次5-10分钟，有效消除肌肉酸痛；改善人体血液循环；睡前按摩5-15分钟，有效改善失眠，提高睡眠质量。

## 使用注意

- 请勿在产品操作时入睡。
- 请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- 连续使用本产品按摩时间请勿超过三十分钟，暖脚时间请勿超过两小时。
- 若产品的布套已经破损，请勿使用。
- 请勿在进食前后一小时使用，以免造成反效果。
- 若是将产品由低温储存处移至温暖环境使用时，可能会因为机内水汽聚集而影响产品的正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后，先将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

## 保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修（外表不在保修范围内，如邮寄保修，用户仅需支付来回运费即可）。
3. 本产品有效保修期为一年。
4. 当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
7. 以下情形不属于保修范围，只提供有偿维修服务（收取人工费和材料费）
  - (a)一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用和保管，使用不当引起的损坏等；
  - (b)用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
  - (C)购买后因自行不良运输造成的损坏；
  - (d)因其他不可抗力因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）造成的损坏

## 产品特性及使用示意

### 产品特性

- 金色甲壳虫设计，时尚靓丽，轻巧便携

- 人体工学设计，让您随时享受专业足疗按摩

根据人体工学原理设计，独特的造型设计和穴位分布完全吻合人体足部结构，就像把专业足疗师请回家一样，可以每天在临睡前、观看电视节目时休闲的“自主足疗”，对足部进行彻底舒松的按摩。

- 双重安全保护，使用更安心

过热断路保护、电流过载保护的双重保证，安全可靠，让您快乐无忧享受足部按摩。

- 五个按键(开关、模式、强度、加热、时间)

脚底部滚轮按摩，带加热功能；

脚背、脚后跟部气动按摩功能；

三种模式，三种强度可自由选择；

额定工作时间10分钟。


- 创新低周波针灸结合传统脚底穴位按摩

- 可拆洗式脚套，让您时刻保持清洁

### 使用示意



## 操作方式及功能说明

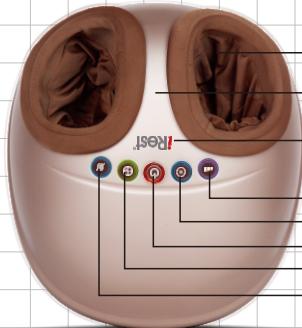

足部按摩袋

机身

商标

强度

模式

开关

时间

温热



### 强度键：控制气波强度

- 1)默认为强度低档，按一下强度中档，再按一下强度高档，依此循环；
- 2)强度低蓝灯亮，强度中绿灯亮，强度强红灯亮。



### 模式键：控制足疗机工作模式

- 1)默认为模式 I，按一下模式 II，再按一下模式 III，依此循环；
- 2)模式 I 蓝灯亮，模式 II 红灯亮，模式 III 红蓝灯交替闪烁；
- 3)模式 I 为舒适足底刮痧+气囊按摩，模式 II 为疲劳改善足底刮痧+气囊按摩，模式 III 为全气压气囊按摩。



### 电源键

- 1)机器插上电源为待机状态，电源键灯光无显示；
- 2)按下该电源键，机器开始工作（加热+气波中+模式 I）机器所有按键蓝灯亮，默认定时时间为10分钟；
- 3)工作时按该键或定时时间结束，机器回归待机状态，电源键灯光无显示；
- 4)使用结束，请关闭机器然后将电源线拔离电源插座。
- 5)机器插上电源为待机状态，电源键灯光闪标；



### 时间键：控制足部按摩器工作时间

- 1)开机默认为蓝色，按摩工作时间为10分钟
- 2)按一下为红色，按摩工作时间为15分钟
- 3)再按一下为紫色，按摩工作时间为20分钟



### 加热键：控制加热功能

默认开机状态下，脚底加热功能自动开启，指示灯为红色，按下温热键，可关闭加热功能，加热功能停止时指示灯亦关闭。

## 产品保修

### a) 储藏

- 不使用时, 请将产品放入彩盒中, 并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- 切勿拧曲电线。
- 切勿使用电线悬挂产品。
- 避免尖状物刮破产品表面。
- 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

### b) 清洁

- 清洁之前, 请确认电源开关已关闭, 并拔出电源插头。
- 请使用干布清洁产品表面。切勿使用具有腐蚀性的清洁剂, 如苯或稀释剂来清洁产品。

### c) 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品, 请用防尘罩(请自行购买)套住产品,
- 防止落入灰尘。

## 故障排除

若在使用此产品时遇到问题, 请参考下列几点提示。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	处理方法
不工作	1. 未通电 2. 功能键未开启	1. 接入电源或检查电源是否连接良好 2. 开启开/关按钮
突然停止操作	1. 断电 2. 按摩时间超过15分钟 3. 连续使用时间过长, 产品过热保护 4. 施力过大, 按摩球堵转	1. 检查电源接口是否接好 2. 重新开启开/关按钮 3. 产品冷却后重新开启 4. 放松脚掌, 减轻机器负荷

## 产品规格

产品型号	SL-C39S	额定电压	12V	—
产品名称	足部按摩器	额定功率	36W	
额定时间	10分钟	待机功率	约0.5W	
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008	噪 音	≤55dB	— — G — ◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆



本产品内有温度保护装置, 当温度超过安全温度, 会自动停止工作, 请拔下电源让其自然冷却后再使用。

## 保 证 书

品    名		经 销 商 (维 修 点)
型    号		
客户名称		
地    址		
电    话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收送修者修理费或零件更换费用。

- 1.购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2.按照使用说明书操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不负免费维修责任）。
- 3.非消耗性零件损害维修。

## 合 格 证

型    号	SL-C39S	
检 验 员		
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008
产品编号		
出厂日期		