

# iRest



关 爱 始 于 足

SL-C32足部按摩器使用说明书



请妥善保管此使用说明书



京东商城店 企业形象 功能秀 官方微信

**艾力斯特健康科技有限公司**

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳县轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699  
服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 产品由中国人保财险股份有限公司承保

※注: 本公司保留对产品的设计更改及解释的权利, 如有改动恕不另行通知, 产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2017年01版 第1版 2017年01版 第1次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

## 目录

---

安全与保养事项	02
部件名称	04
功能	05
使用方法	06
产品规格	10

## 重要安全警告



### 1、安全警告

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 请按本说明书指示使用此器具。
- 请使用与此器具匹配的电源，请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处。
- 禁止将液体泼向本产品，以免短路引起事故。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可用强力。
- 切勿使电线受损或篡改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。

## 重要安全警告



### 2、使用环境


- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具。

### 3、不宜使用此器具者。


- 怀孕或经期妇女。
- 皮肤传染病者。
- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 近期内动过手术者，请遵照医师指示使用。

### 安全警告

严禁小孩直接坐在产品上或者在产品上踩跳等高危动作，否则会导致产品侧翻摔倒和破损，以避免造人身伤害。

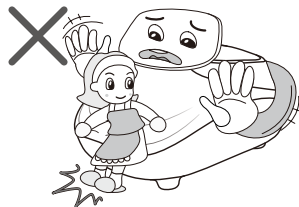


## 部件名称

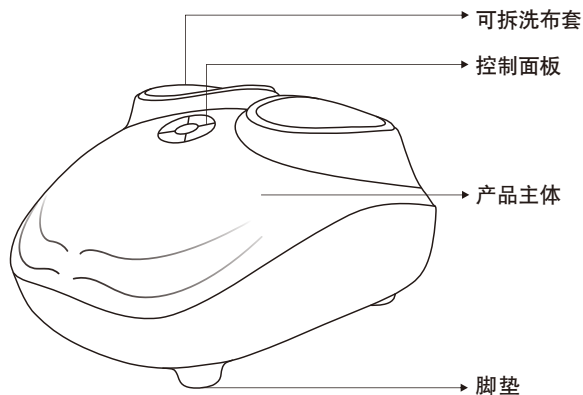

## 功能

- 根据人体工学原理设计，独特的造型设计与人体足部穴位相结合，对人体足部进行彻底舒适揉捏按摩，让随时享受专业足疗按摩。外观新颖、时尚，轻巧便携。
- 整机采用全气囊式设计，对人体脚部有效的揉捏按摩，刺激您的脚部反射穴位。
- 揉捏按摩，给您最放松和倍感活力的按摩体验。
- 设有加热功能采用咪泡加热，具有热疗效果。
- 设有自动模式键(模式 1:以脚底单抖动为主，模式 2:以脚底滚动为主，模式 3:脚底滚动和抖动混合)三种模式可自由切换，三种气压强度可调。
- 设有每按一次功能按键时，蜂鸣器响鸣都有提示功能。
- 在按摩进行15分钟后，将自动关闭所有按摩功能。
- 揉捏布套都配有拉链的可拆洗脚套，可以轻易的保持清洁与卫生。

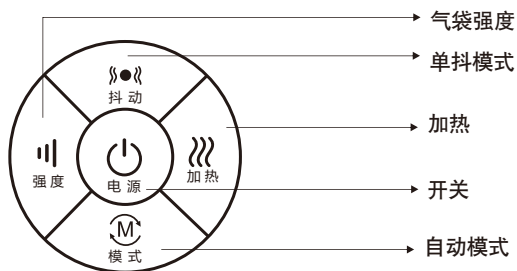

## 使用方法

### 一、开始按摩

- 将电源插入电源插座，按“电源”键开机电源指示灯亮，处于待机状态，按“模式”，“单抖”键功能有效；开机后再按一次“电源”将关机，操作面板指示灯熄灭，除电源键其它按键无效。



• 连接电源方法示意图

按键	描述
	<p>自动模式功能切换键，脚机有3种模式，通过该按键对于充气模式，脚底滚动按摩模式，及脚底抖动模式组合功能，进行切换。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•自动模式指示灯：自动模式1-蓝色、自动模式2-红色、自动模式3-绿色；</li> <li>•自动模式1.以脚底单抖动为主；</li> <li>•自动模式2.以脚底滚动为主；</li> <li>•自动模式3.脚底滚动和抖动混合；</li> </ul>
	<p>单抖模式功能切换键，脚机有3种单抖模式，通过该键对单抖模式按键进行切换。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•模式指示灯：单抖模式1-蓝色、单抖模式2-红色、单抖模式3-绿色</li> <li>•单抖模式1:波浪振动；</li> <li>•单抖模式2:间歇振动；</li> <li>•单抖模式3:长振动；</li> </ul>

## 使用方法

按键	描述
	<p>只有工作在自动模式功能才有效；气袋强度分别有高、中、低三档默认为中档。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•档位指示灯:中档-蓝色、高档-红色、低档-绿色。</li> </ul>
	<p>加热开关键，加热打开时操作面板加热的红色指示灯点亮，加热键只有在自动模式或单抖功能开启时才有效，这两个功能都关闭时加热也同时关闭，指示灯也熄灭；</p>

### 注意

- 1.不经常使用机器时，请关闭电源开关，并拔下电源插头。
- 2.按摩过程中及按摩结束后，不可直接站立在机器上，以免因站立不稳而摔倒。

### 二、故障排除

- 本章归纳了本产品在使用时最常遇到的问题，如果你无法用下面的信息解决问题，请与您所在地区授权的维修中心或客户服务中心咨询。

如果您遇到列表中未提及的问题，应首先尝试下列步骤：

- 1.关闭产品的电源，从插座中拔下电源插头。
- 2.让本产品保持关闭状态60分钟。
- 3.重新将插头插入电源插座并开启本产品。

## 使用方法

问题	可能的原因	解决方法
产品不能工作	产品电源插头没有插上或未打开产品总电源开关。	检查产品总开关是否开启。检查产品所示的电压是否与当地的电压相符合，将电源插头插入插座。
	产品刚刚完成15分钟按摩并自动切换至待机模式。	如果你想再按摩一次，请再次按“电源”按钮。
	你已经连续使用本产品长达45分钟，导致过热保护装置切断了产品的电源。	重新使用本产品之前，必须先将产品插头拔下并冷却60分钟。
	产品上放置的负荷过重（例如有重物放置在产品顶部）。	拔下产品电源插头，移动多余的重量（如果负荷仍在产品上）请重新插入产品电源并将产品开启
产品发热	加热功能为打开状态。	关闭加热功能。
	你已连续让本产品执行了45分钟按摩。	拔下产品电源插头并让其冷却，在每次使用之后拔下产品的电源插头。
有声音从产品中传出	此声音是由于产品的机械结构造成。	此声音是正常的，并不意味着产品的功能出现故障。

## 使用方法

### 三、产品保养

#### •清洁

不要使用钢丝球，研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品，切勿将产品浸水中。

- 1.将产品从电源插座中拔下。
- 2.用干布清洁控制板和电源线。
- 3.请勿使用清洁剂。

#### •存放

- 1.将插头从电源插座中拔下。
- 2.将本产品储存在远离日光照射的阴凉干燥处。
- 3.请勿将重物放在本产品顶部。


#### •更换

如果外壳损坏，请停止使用本产品，并从你所在地区经授权的维修服务中心或客户服务中心询问。

#### •保修与服务

如果你需要有关产品的详细信息或有任何问题，请与当地的经销商联系。

## 产品规格

型 号	SL-C32
名 称	足部按摩器
额定电压	220-240V~ 50Hz / 60Hz
额定功率	45W
额定时间	15分钟
噪 音	≤ 55dB
安全结构	
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

保 证 书		
品 名		经销商（维修点）
型 号		
客户名称		
地 址		
电 话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收修理费或零件更换费。

- 1、购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2、按照使用说明操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不承担免费维修责任）。
- 3、非消耗性零件损害维修。

