


iRest

按摩抱枕

会 按 摩 的 抱 枕
SL-D107 使用说明书

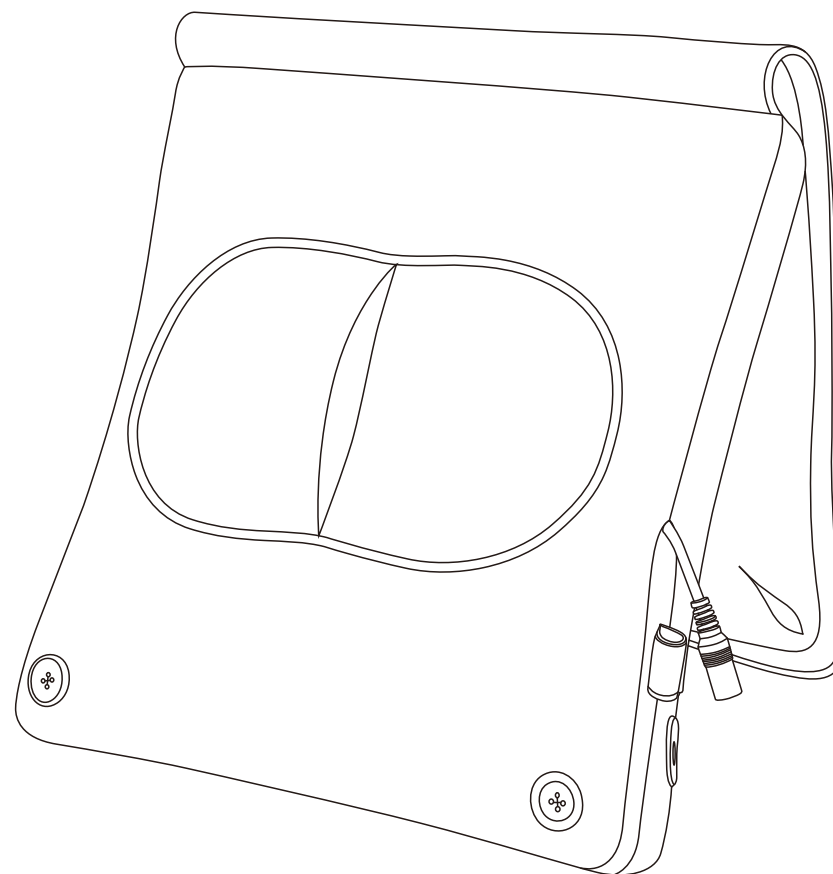

请妥善保管此使用说明书



京东旗舰店 企业形象 官方微信

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话: 0573-89973858 传真: 0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话: 0577-63176666 传真: 0577-63176699
服务热线电话: 800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国人保财产保险股份有限公司承保

※注: 本公司保留对产品设计更改及解释的权利, 如有改动恕不另行通知, 产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2017年06月 第一版 2017年06月第二次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
产品名称	04
产品配件	04
功能	05
操作说明	05
产品保养	05
故障排除	06
产品规格	06

安全与保养事项

1. 重要安全警告

- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处。
- 禁止将水泼向本产品，以免短路引起事故。
- 如果电源线或插头损坏，千万不要擅自拆卸修理，请及时与经销商联系，要求维修保养。
- 请使用与此器具匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 颈背受伤或近期内动过手术者，请遵照医师的指示小心使用。

2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具。

3. 不宜使用此器具者


- 皮肤传染病者。
- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

安全与保养事项

4. 安全事项

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源适配器发生任何损坏或功能异常，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 整机皮罩或在罩破损应禁止使用。
- 切勿用力猛压或全身施压在按摩器上，不能与硬物体相接触，不可重压或踩踏。
- 防止水或其他腐蚀性液体流入机内而引起故障，导致损坏机器。
- 请勿用手提电源线或手控线，从而造成机体悬空和摇摆，导致线芯断开使其无法正常工作。
- 请勿任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源及易燃的地方，容易发生故障和危险，易造成变形，变色或损坏。
- 使用过程中有异常应立即停止使用并切断电源。
- 精神病患者，身体瘫痪患者必须在有人看护下谨慎使用或先咨询医师意见。

产品名称

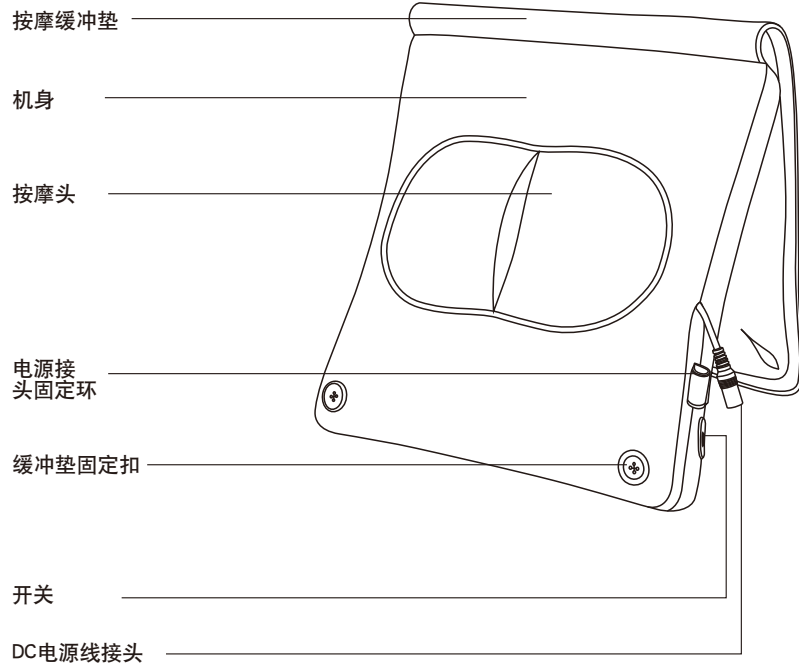


产品配件

电源

输入：100-240V~ 50Hz/60Hz

输出：12V= 2A

使用方法：（1）电源插孔插到按摩器上 （2）电源插头插到插座上。

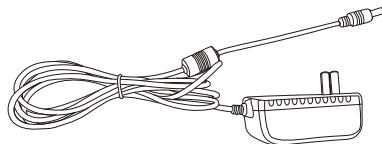

功能

- 新概念揉捏式按摩，外观新颖，造型时尚，符合人体工程学设计。
- 整机有4个针对颈部、腰部、腹部、背部、腿部等部位特制按摩头，给你倍感轻松的按摩体验。
- 设有加热功能，采用气泡加热，一键开启温热护理。
- 本产品一次按摩时间为15分钟，当按摩结束后会自动关机。如果想提前结束按摩，可以长按“电源开关”键，按摩器关机。

操作说明

- 开机：在关机状态下短按功能键，按摩器开始运行，加热功能默认开启。
- 功能切换：在开机状态下短按功能键可以开关加热功能，按摩头每隔1分钟自动切换一次方向。
- 关机：在开机状态下长按功能键1秒，按摩器结束运行。
- 产品额定工作时间（定时）15分钟。

注意事项：为了避免损坏按摩器请不要恶意施加外力阻止按摩头旋转；建议一次使用时间不要超过1小时导致内部温度过高；请使用专用的适配器给按摩器供电。

产品保养

- 如果您的产品因运送，搬移及其他原因或存放在低温环境下过，在使用前，请放置于室温一小时后方可开机。
- 如将产品置于特殊的环境中如易受灰尘、潮湿、硫磺等物质侵蚀的地方，请事先通知专业人员做好防护措施，否则可能造成机体损坏。
- 清洁产品前，请先将电源插头拔出。
- 请勿以茶类，稀释剂或任何有侵蚀性溶剂洗擦本产品。
- 请使用干布清洁本产品。
- 切勿将本产品长期暴露于阳光直射处，亦不能接近火源、高温处。
- 如长期不使用本产品，建议将电源线拔出后整理好储存在较无尘和干燥的空间。

故障排除

本节归纳了本产品在使用中最常遇到的问题，如果您无法用下面的咨询解决问题，请与您购买的当地经销商联系。

状况	可能的原因	解决方法
产品不能运行	产品没插电源。	将电源插头插上。
	产品刚运行15分钟，自动关闭。	重新复位开关并开启开关键。
	连续使用本产品45分钟，导致过热保护。	冷却1小时左右再次使用本产品。
	产品负载过重，比如人站立在产品上，导致过载保护或者损坏。	请按正常的方法使用本产品。
产品发热	加热功能为打开状态。	关闭加热功能。
	连续使用本产品45分钟或者负载过重。	拔下插头等待1小时，再次插上插头使用。
有声音从产品传出	此声音是由于产品的机械结构发出的正常现象。	此声音是正常的，并不表示产品出现故障。

产品规格

型 号	SL-D107
名 称	一节按摩垫
额定电压	12V ———
额定功率	24W
额定时间	15分钟
安全结构	Ⅲ
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

保 证 书

品 名		经销商（维修点）
型 号		
客户名称		
地 址		
电 话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收送修者修理费或零件更换费用。

- 1、购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2、按照使用说明书操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不负免费维修责任）。
- 3、非消耗性零件损害维修。

