

iRest

# 爱膝宝

爱 楷 膝 盖 的 法 宝

SL-C36-1使用说明书

请妥善保管此使用说明书



京东旗舰店

企业形象

官方微信

**艾力斯特健康科技有限公司**

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话: 0573-89973858 传真: 0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话: 0577-63176666 传真: 0577-63176699


服务热线电话: 800-8577-201 400-8888-786 [Http://www.iRest.com](http://www.iRest.com) E-mail: iRest@iRest.com

**中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国人保财险股份有限公司承保**

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2017年3月 第一版

2017年3月 第一次印刷

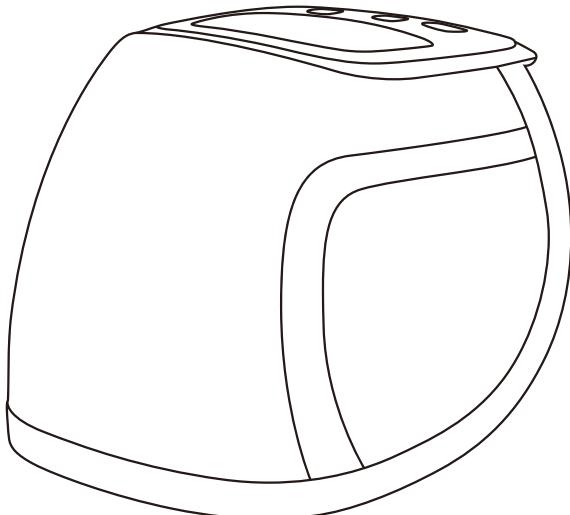

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

## 目 录

---

安全与保养事项	02
部件名称	04
功能	05
使用方法	06
产品规格	09

## 重要安全警告



### 1、安全警告

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 请按本说明书指示使用此器具。
- 请使用与此器具匹配的电源，请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用。。
- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处。
- 禁止将液体泼向本产品，以免短路引起事故。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可用强力。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。

### 2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具。

## 重要安全警告



### 3、不宜使用此器具者。

- 怀孕或经期妇女。
- 皮肤传染病者。
- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 近期内动过手术者，请遵照医师指示使用。
- 膝盖出现急性浮肿或出血的患者请事先咨询医生后使用。
- 类风湿性关节炎患者请事先咨询医生后使用。
- 疑似为急性外伤引起的浮肿、细菌感染、其它特殊炎症的患者请先咨询医生后使用。
- 使用产品后出现疼痛加剧时，请立即停止使用。
- 适应产品时请勿将产品直接与皮肤接触，避免加热功能过热着伤皮肤。

### 4.锂电池警告

- 这个设备包含固定的锂电池。电池必须回收利用或者得到正确处理。关于电池回收和处理请联系当地废物管理局。

#### 注意：

- 电量过低时需要及时充电，避免过度放电。
- 长时间不用应该每隔一个月充一次电，避免电池老化。

## 部件名称

产品主体



显示屏

控制按键


电源插孔



绑带气囊按摩

固定带

碳纤维远红外加热

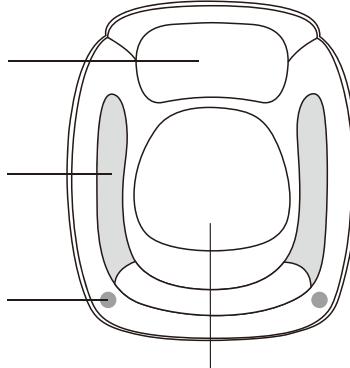

左右气压揉捏按摩及  
碳纤维远红外加热

左右2颗磁疗

振动按摩及  
碳纤维远红外加热

## 功能

- 工作显示屏，清晰可见。
- 根据人机工程学原理设计，确保产品与膝盖的完美贴合，对膝盖进行舒适揉捏按摩、高频震动按摩、热疗按摩、磁疗按摩。外观新颖、时尚、轻巧便携。
- 内置天然磁石，促进微循环，快速缓解膝盖疼痛。
- 整机采用全气囊式设计，对人体膝盖部位有效的揉捏按摩，刺激您的膝盖部反射穴位。
- 揉捏按摩，给您最放松和倍感活力的按摩体验。
- 设有加热功能采用碳纤维远红外加热，具有热疗效果。
- 设有每按一次功能按键时，蜂鸣器响鸣都有提示功能。
- 在按摩进行15分钟后，将自动关闭所有按摩功能。每次连续使用时间不超过30分钟。

## 使用方法

### 一、开始按摩

1. 将产品戴在膝盖上，用固定带将产品绑紧在膝盖上到最佳效果。请将产品尽量紧贴在膝盖上。
2. 短按【①】键，产品开始工作。
3. 产品开启后默认中档模式，中档按摩压力，中档温度，振动开。
4. 产品开启后，所有按键亮白色灯，显示屏对应显示相应图标。
5. 在开机状态下，短按【①】键，可以开启或关闭振动功能。
6. 短按【加热】键，可调节加热温度（中-高-低-中-高-低依次循环），显示屏有对应温度档位显示；长按【加热】键，可取消加热功能。同时产品以“滴滴”声提示正在关闭。
7. 短按【气压】键，可调节气囊揉捏力度大小（中-强-弱-中-强-依次循环），显示屏对应显示力度档位；长按【气压】键，可以关闭揉捏功能并放气，同时产品以“滴滴”声提示正在关闭。
8. 产品运行默认15分钟后自动关机。

### 二、产品充电

1. 请使用DC5V适配器，将随机器配带的充电线，USB端插入适配器，另一端3.5 DC头插入机器电源插孔内，机器显示面板对应显示充电状态：
  - 显示面板电池图标亮红色，代表正在充电，三格进度条跑动，代表当前电量小于33%；
  - 充电完成33%，第一格进度条常亮，另两格进度条跑动；
  - 充电完成66%，第一、二格进度条常亮，第三格闪烁；
  - 充电完成时，三格进度条熄灭，电池图标由红色转为绿色。
2. 在使用产品时，如果电池图标红灯闪烁，应当停止使用，并立即给产品充电。
3. 给产品充电，请尽量使用DC5V，1A或1A以上的适配器，当然也可以用电脑USB口给本产品充电。

## 使用方法

### 三、故障排除

- 本章归纳了本产品在使用时最常遇到的问题，如果你无法用下面的信息解决问题，请与您所在地区授权的维修中心或客户服务中心咨询。
  - 如果您遇到列表中未提及的问题，应首先尝试下列步骤：
1. 关闭产品的电源，从插座中拔下电源插头。
  2. 让本产品保持关闭状态60分钟。
  3. 重新将插头插入电源插座，充电完成后并开机使用本产品。

问题	可能的原因	解决方法
产品不能工作	正在充电的产品不能工作。	此产品为了安全防护设计，充电时不能使用；充电完成后，拔掉充电插头，即可按开机键使用本产品。
	产品刚刚完成15分钟按摩并自动切换至待机模式。	如果你想再按摩一次，请再次按下①按钮。
产品不能工作	你已经连续使用本产品长达45分钟，导致过热保护装置切断了产品的电源。	重新使用本产品之前，必须先将产品插头拔下并冷却60分钟。
产品发热	加热功能为打开状态。	关闭加热功能。
产品发热	你已连续让本产品执行了45分钟按摩。	拔下产品电源插头并让其冷却，在每次使用之后拔下产品的电源插头。
有声音从产品中传出	此声音是由于产品的机械结构造成。	此声音是正常的，并不意味着产品的功能出现故障。

## 使用方法

### 四、产品保养

#### · 清洁

不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品，切勿将产品侵水中。

1. 将产品从电源插座中拔下。
2. 用干布清洁控制板和电源线。
3. 请勿使用清洁剂。

#### · 存放

1. 将插头从电源插座中拔下。
2. 将本产品储存在远离日光照射的阴凉干燥处。
3. 请勿将重物放在本产品顶部。

#### · 更换

如果外壳损坏，请停止使用本产品，并从你所在地区经授权的维修服务中心或客户服务中心询问。

#### · 保修与服务

如果你需要有关产品的详细信息或有任何问题，请与当地的经销商联系。

## 产品规格

型 号	SL-C36
配 置	1
名 称	爱膝宝
额定电压	5V ——
额定功率	5W
额定时间	15分钟
噪 音	< 55dB
安全结构	◆
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

保 证 书	
品 名	
型 号	
客户名称	
地 址	
电 话	
购买日期	保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收修理费或零件更换费。

1. 购买时已发现有破损或不良使用情况者。
2. 按照使用说明操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不承担免费维修责任）。
3. 非消耗性零件损害维修。