

使用方法

· 将电源线插进电源插座，电源指示灯闪烁，进入待机状态。



· 连接电源方法示意图



· 电源开关

	控制产品电源开关：开机时，蜂鸣器响一声为开关状态，其他按键功能响应。（电源键开启或者关闭后，小腿夹板自动复位）
	控制产品加热功能，可单独控制加热效果，功能开启时，指示灯为蓝色。
	控制产品按摩强度，按摩功能开启时，此键方可响应，力度分三档，绿灯为低档，蓝灯为中档，红灯为高档，功能开启时，默认为中档。
	足部键为足部自动按摩功能，侧重足部部位功能按摩，功能开启时，指示灯为蓝色；
	腿部键为腿部自动按摩功能，侧重腿部部位功能按摩，功能开启时，指示灯为蓝色；
	美腿键为大腿自动按摩功能，侧重大腿部位功能按摩，功能开启时，指示灯为蓝色；
	舒缓键为整体自动按摩功能，足部与腿部功能全方位配合按摩，功能开启时，指示灯为蓝色



切断电源方法示意图

· 按摩工作20分后，自动关闭所有功能，电源指示灯闪烁，进入待机模式。

注意

- 1.不经常使用机器时，请关闭电源开关，并拔下电源插头。
- 2.按摩过程中及按摩结束后，不可直接站立在机器上，以免因站立导致机器损坏。

产品规格

名称	双截腿部按摩仪
型号	SL-C801
额定电压	220-240V~ 50Hz
额定功率	100W
安全结构	
额定时间	20分钟

保 证 书

品 名		经 销 商（维 修 点）
型 号		
客 户 名 称		
地 址		
电 话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收送修者修理费或零件更换费用。

- 1.购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2.按照使用说明书操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不负免费维修责任）。
- 3.非消耗性零件损坏维修。

合 格 证

型 号	SL-C801	
检 验 员		
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008
产品编号		
出厂日期		




请妥善保管此说明书

艾利斯特健康科技有限公司 授权制造：浙江家中豪健康产品有限公司
地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 地址：浙江省平阳县全轻工基地家具园兴隆路18号
电话：0573-89973858 传真：0573-89973638 电话：0577-63176666 传真：0577-63176699
服务热线电话：800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com
中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国人保财险股份有限公司承保
注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权利，如有改动恕不另行通知，产品颜色和相关数据等均以实物为准！
2018年02月 第一版 2018年02月 第一次印刷

iRest

双截腿部按摩仪

SL-C801 使用说明书

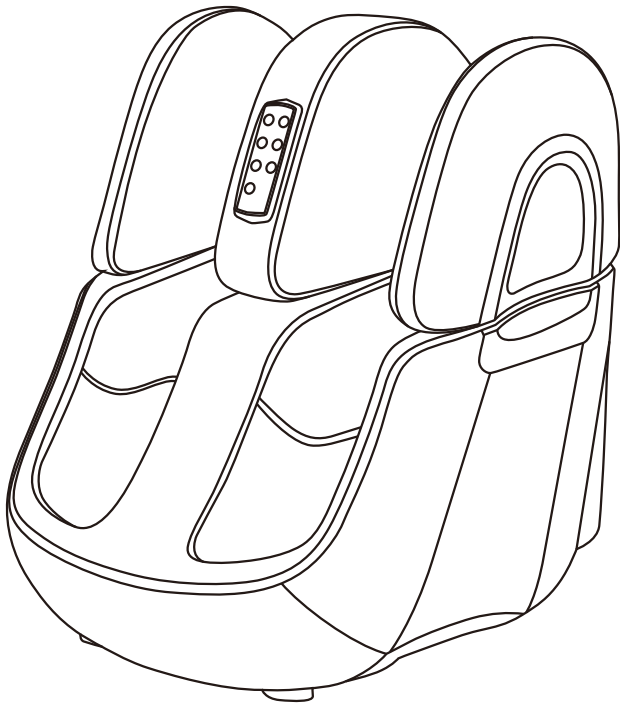

重要安全警告



1、安全警告

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍
- 请按本说明书指示使用此器具
- 请使用与此器具匹配的电源，请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用
- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处
- 禁止将液体泼向本产品，以免短路引起事故
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害
- 请勿使用湿手拔插电源插头
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可用强力
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害
- 不可使用未推荐的配件及附件
- 请勿在室外使用此器具
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤
- 饭后一小时内请勿使用本产品
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。

2、使用环境


- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具

3、不宜使用此器具者


- 怀孕或经期妇女
- 皮肤传染病者
- 骨质疏松症患者
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者
- 发高烧者
- 身体有创伤或体表患病者
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者
- 身体潮湿时禁止使用此器具
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具
- 近期内动过手术者，请遵照医师指示使用

主要功能

- 1.全新的气囊按摩双截美腿机，外观双截设计，上截带翻转功能，外观新颖、时尚。
- 2.气压按摩与脚底滚轮按摩：利用按摩椅气压技术，力度柔和，感觉立体，按摩手法灵活多变，力度由浅入深，更能深入刺激按摩部位。脚底滚轮更全部的针对脚底穴位进行刺激。
- 3.三种力度调节，五种程序17种不同按摩组合：多种程序组合，让您可根据自己喜欢的力度及程序进行舒服的按摩，达到理想的按摩效果。
- 4.多角度按摩：可调节多个角度(0-90°)达到最方便按摩效果，底部带手动翻转支撑架，角度为20度，抬起来可方便的按摩膝盖。
- 5.远红外线发热：开启加热功能具有热疗效果。
- 6.全方位按摩：按摩范围广，从脚部到小腿，按至膝盖大腿，全部按摩到位。
- 7.安全性：在使用过程中若突然断电也可以自动放气，不会夹住不放。
- 8.在按摩进行20分钟后，会自动激活“自动关闭”功能。
- 9.上下截揉捏布套都配有拉链的可拆洗面套，可以轻易的保持清洁与卫生。

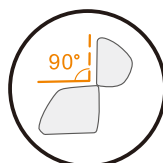

腿部翻转

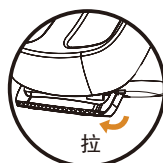

支撑架



底部滚轮

部件名称与功能

